

Лабораторный г-образный кран для холодной воды Stegler KV-1-200




Руководство по эксплуатации

1. Назначение изделия

Лабораторный кран-штуцер для управления потоком холодной и горячей воды. Выполнен из латуни, покрытой термостойкой порошковой краской.

2. Технические характеристики

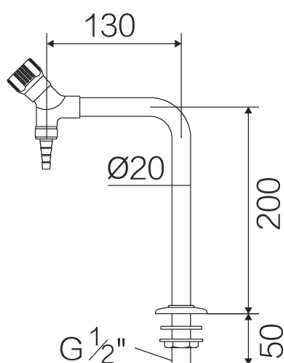

Материал исполнения	Латунь
Габаритные размеры, мм	312x210x50
Масса нетто, кг	0,5
Масса брутто, кг	0,7
Резьба, дюймы	1/2

3. Комплектация

Кран-штуцер лабораторный	1 шт.
Аэратор	1 шт.
Уплотнительное кольцо	1 шт.
Стопорная шайба	1 шт.
Гайка	1 шт.

4. Установка

Снимите с излива аэратор, чтобы он не забился ржавчиной и другими возможными загрязнениями из труб. Аэратор этой серии соответствует разъему G 1/2"

1. Определите место установки Изделия. Просверлите в рабочей поверхности отверстие диаметром 20 мм.
2. Установив Изделие на рабочую поверхность. Чтобы вода не протекала по корпусу, поместите уплотнительное кольцо в специальный паз в основании смесителя.
3. Надежно зафиксируйте Изделие при помощи гайки, предварительно установив второе уплотнительное кольцо и стопорную шайбу.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента реализации в соответствии с документом, подтверждающим факт его приобретения. Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного срока при выполнении пользователем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- Если повреждение произошло по вине пользователя, в процессе перевозки, установки или эксплуатации изделия.
- Если повреждение произошло при разборке изделия неавторизованным персоналом.
- При невозможности подтверждения факта приобретения изделия документально.
- При возникновении повреждения из-за несоблюдения требований, описанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.
- Если повреждение произошло по причине стихийного бедствия или аварии.
- По истечению установленного срока гарантийных обязательств.

6. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

ООО «НВ-Лаб».

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «НВ-Лаб».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru