


ПЛАНТОГРАФ

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Плантограф предназначен для получения изображения площади опоры стопы

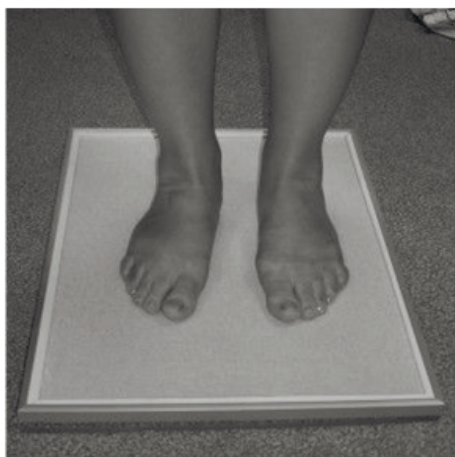

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Используемые материалы: ПВХ 8 мм ГОСТ 17622-72, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949-75, алюминий анодированный, плёнка полиэтиленфталоновая ТУ 2255-466-05761784-2002, трикотажная ткань с клеевым покрытием арт. 376-160 (376-220) или ткань льняная ГОСТ 5665-77,

2.2 Габаритные размеры 440х375х25

2.3 Масса плантографа - 2.1 +/- 0,1 кг.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- Плантограф - 1шт.
- Ванночка - 1шт.
- Валик - 1шт.
- Паспорт - 1шт.
- Краска - 1шт.
- Бумага А3 - 50 лист.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 4.1 Провести расконсервацию комплекта, его осмотр и проверку комплектности согласно п.3.
- 4.2 Между рамкой и тканью для каждого больного должен вкладываться чистый лист бумаги (лучше – белой) размерами 40х30 см.
- 4.3 При помощи валика (или губки) на полотно должен быть нанесен слой типографской или штемпельной краски.
- 4.4 Перед каждым использованием плантографа и в процессе дальнейшей эксплуатации поверхность плёнки плантографа должна быть подвергнута дезинфекции методом двукратной протирки салфеткой, смоченной трёхпроцентным раствором перекиси водорода (при температуре не менее +18С) и с интервалом между протирками – 15 минут по ОСТ 42-21-2-85.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Плантограф устанавливается на пол. Для снятия отпечатков необходимо сесть на стул и поставить стопы на плёнку по оси плантографа. После этого медленно подняться (не сходя с места) с равномерным упором на обе стопы. В таком положении производится обвод стопы карандашом. Потом медленно сесть на стул и убрать ноги с плёнки.

Затем открыть рамку плантографа и извлечь лист бумаги с отпечатком стопы.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плантограф соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

Штамп

Подпись

Дата

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1 Изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня реализации; гарантийный срок хранения 1-год.
- 7.3 В течении гарантийного срока изготовитель безвозмездно устраняет дефекты, возникшие по его вине, путём бесплатного ремонта или замены изделия (или его составных частей)
- 7.4 Изготовитель не несёт ответственности за повреждение изделия в результате неправильной эксплуатации и хранения.

8. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

- 8.1 Рекламации предъявляются изготовителю в установленном порядке с приложением технически обоснованного акта.

Изготовитель:

ООО «КОРСА» Россия, 115407, г. Москва, ул. Речников, д.7, стр.22, помещ.1 Тел.: 8 (800) 500-93-80