

Лабораторный п-образный кран-смеситель Stegler KS-310-2




Руководство по эксплуатации

1. Назначение изделия

Кран-смеситель для подачи холодной и горячей воды, выполнен из латуни, покрытой порошковой краской. Излив смесителя способен вращаться вокруг своей оси на 360°.

2. Технические характеристики

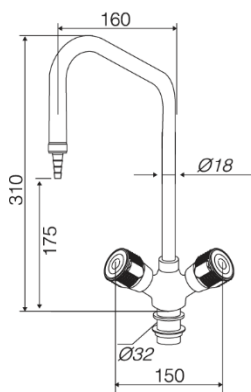

Материал исполнения	Латунь
Габаритные размеры, мм	345x200x170
Диаметр излива, мм	18
Масса брутто, кг	1,4
Масса нетто, кг	0,9
Расстояние между регулируемыми ручками, мм	150
Длина подводки, мм	60
Давление воды на входе, МПа	0,9 – 1,2

3. Комплектация

Кран-штуцер лабораторный	1 шт.
Аэратор	1 шт.
Подводка для воды, гибкая	2 шт.
Гайка ручной затяжки	1 шт.
Гайка крепления смесителя	1 шт.

4. Установка

Снимите с излива аэратор, чтобы он не забился ржавчиной и другими возможными загрязнениями из труб. Аэратор этой серии соответствует разъему G 1/2".

Установите «Кран - смеситель» (далее – Изделие) в следующей последовательности:

1. Определите место установки Изделия. Просверлите в рабочей поверхности отверстие диаметром 30 мм.
2. Присоедините штуцеры гибких подводок к смесителю, пропустив их через гайку крепления смесителя и закрутив их от руки. Предварительно проверьте, что на концах резьбы установлены уплотнительные кольца. Не закручивайте штуцеры ключом — излишнее усилие может повредить прокладки.
3. Установите Изделие на рабочую поверхность. Чтобы вода не протекала по корпусу, поместите уплотнительное кольцо (в комплекте не поставляется) в специальный паз в основании смесителя.
4. Надёжно зафиксируйте изделие при помощи гайки ручной затяжки.
5. Наденьте на штуцеры водорозеток или краны раковины накидные гайки гибких подводок и затяните их от руки. Подтяните соединения ключом, но не сильно — достаточно будет половины оборота или немного больше.
6. Для проверки и промывки системы от возможных загрязнений откройте запорные краны на Изделии или стояках. Пустите воду и убедитесь, что при повороте крана холодная и горячая текут, как предполагается.
7. Верните на место аэратор, закрутив её в смеситель от руки по часовой стрелке.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента реализации в соответствии с документом, подтверждающим факт его приобретения. Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного срока при выполнении пользователем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- Если повреждение произошло по вине пользователя, в процессе перевозки, установки или эксплуатации изделия.
- Если повреждение произошло при разборке изделия неавторизованным персоналом.
- При невозможности подтверждения факта приобретения изделия документально.
- При возникновении повреждения из-за несоблюдения требований, описанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.
- Если повреждение произошло по причине стихийного бедствия или аварии.
- По истечению установленного срока гарантийных обязательств.

6. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

ООО «НВ-Лаб».

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «НВ-Лаб».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru