

Лабораторный газовый кран Stegler KG-1-70




Руководство по эксплуатации

1. Назначение изделия

Кран для подключения к линиям природного газа, сжатого воздуха или азота. Выполнен из литой меди, покрытой порошковой эпоксидной краской.

Подходит для монтажа в стеновую панель.

2. Технические характеристики

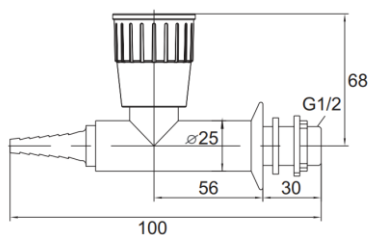

Материал исполнения	Литая медь
Габаритные размеры, мм	100x50x90
Диаметр, мм	25
Резьба	1/2"

3. Комплектация

Кран газовый лабораторный	1 шт.
Уплотнительное кольцо	2 шт.
Стопорная шайба	1 шт.
Фиксирующая гайка	1 шт.
Контргайка	1 шт.
Уплотнительное кольцо	1 шт.

4. Установка

Установите «Лабораторный газовый кран» (далее – Изделие) в следующей последовательности:

1. Определите место установки изделия. Просверлите в рабочей поверхности отверстие диаметром 20 мм.
2. Установите узкое уплотнительное кольцо в паз гайки фиксации Изделия.
3. Установив Изделие на рабочую поверхность, установите широкое уплотнительное кольцо, затем стопорную шайбу и зафиксируйте Изделие при помощи контргайки.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента реализации в соответствии с документом, подтверждающим факт его приобретения. Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного срока при выполнении пользователем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- Если повреждение произошло по вине пользователя, в процессе перевозки, установки или эксплуатации изделия.
- Если повреждение произошло при разборке изделия неавторизованным персоналом.
- При невозможности подтверждения факта приобретения изделия документально.
- При возникновении повреждения из-за несоблюдения требований, описанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.
- Если повреждение произошло по причине стихийного бедствия или аварии.
- По истечению установленного срока гарантийных обязательств.

6. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

ООО «НВ-Лаб».

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «НВ-Лаб».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru