

Лабораторный вентиль газового выносного крана Stegler VG-35




Руководство по эксплуатации

1. Назначение изделия

Лабораторный вентиль предназначен для регулирования потока газа. Выполнен из латуни, покрытой порошковой краской.

2. Технические характеристики

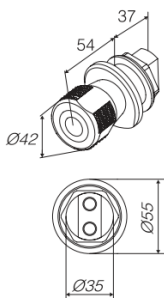

Материал исполнения	Литая медь
Габаритные размеры, мм	100x50x90
Диаметр, мм	25
Масса нетто, кг	0,6
Масса брутто, кг	0,7
Резьба	1/2"

3. Комплектация



Вентиль лабораторный	1 шт.
Уплотнительное кольцо	1 шт.
Контргайка	1 шт.
Гибкие подводы	1 шт.

4. Установка

1. Для установки Изделия на рабочую поверхность просверлите в рабочей поверхности отверстие диаметром 35 мм
2. Установите узкое уплотнительное кольцо в паз гайки фиксации Изделия
3. Присоедините штуцеры гибких подводов к Изделию. Предварительно проверьте, что на концах резьбы установлены уплотнительные кольца.
4. Установив Изделие на рабочую поверхность, зафиксируйте его при помощи контргайки.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента реализации в соответствии с документом, подтверждающим факт его приобретения. Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного срока при выполнении пользователем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- Если повреждение произошло по вине пользователя, в процессе перевозки, установки или эксплуатации изделия.
- Если повреждение произошло при разборке изделия неавторизованным персоналом.
- При невозможности подтверждения факта приобретения изделия документально.
- При возникновении повреждения из-за несоблюдения требований, описанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.
- Если повреждение произошло по причине стихийного бедствия или аварии.
- По истечению установленного срока гарантийных обязательств.

6. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

ООО «НВ-Лаб».

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «НВ-Лаб».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru