

## Двойной газовый лабораторный кран Stegler KG-2-105





### Руководство по эксплуатации

#### 1. Назначение изделия

Лабораторный газовый кран предназначен для регулирования потока газа. Выполнен из литой меди, покрытой порошковой краской.

#### 2. Технические характеристики

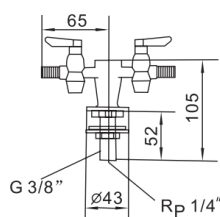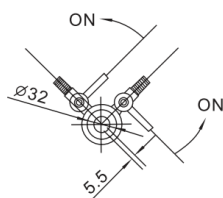

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Материал исполнения    | Литая медь |
| Габаритные размеры, мм | 120x105x70 |
| Диаметр, мм            | 42         |
| Резьба                 | 3/8"       |

#### 3. Комплектация

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Газовый кран          | 1 шт. |
| Уплотнительное кольцо | 1 шт. |
| Стопорная шайба       | 1 шт. |
| Контргайка            | 1 шт. |

#### 4. Установка

- Для установки Изделия на рабочую поверхность просверлите в рабочей поверхности отверстие диаметром 32 мм.
- Установив Изделие на рабочую поверхность, зафиксируйте его при помощи контргайки, предварительно установив уплотнительное кольцо.

#### 5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента реализации в соответствии с документом, подтверждающим факт его приобретения. Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного срока при выполнении пользователем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- Если повреждение произошло по вине пользователя, в процессе перевозки, установки или эксплуатации изделия.
- Если повреждение произошло при разборке изделия неавторизованным персоналом.
- При невозможности подтверждения факта приобретения изделия документально.
- При возникновении повреждения из-за несоблюдения требований, описанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.
- Если повреждение произошло по причине стихийного бедствия или аварии.
- По истечению установленного срока гарантийных обязательств.

#### 6. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

ООО «НВ-Лаб».

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «НВ-Лаб».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: [service@nv-lab.ru](mailto:service@nv-lab.ru)