




Столик подъемный лабораторный металлический HB-150 / HB-200

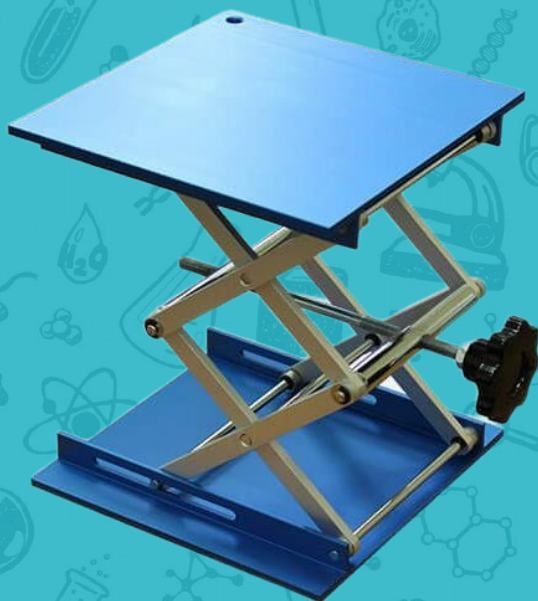

Руководство по эксплуатации

1. Введение

Благодарим Вас за выбор продукции нашей торговой марки «STEGLER»: Столика подъемного лабораторного металлического НВ-150 / НВ-200, в дальнейшем именуемого «Изделие».

Настоящее Руководство по эксплуатации является объединенным эксплуатационным документом на указанное Изделие и содержит основные сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания, транспортировки и хранения Изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию Изделия, повышающей его надежность и улучшающей качество, в конструкцию Изделия могут быть внесены изменения, не влекущие за собой существенных изменений в процесс эксплуатации и не отраженные в настоящем Руководстве по эксплуатации.

2. Назначение, описание и область применения

Изделие используется для размещения на нём различных устройств и сосудов в лабораторных условиях.

3. Комплектация

Столик подъемный лабораторный металлический	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

4. Меры безопасности при работе с Изделием

Внимательно изучите настоящее Руководство по эксплуатации до начала использования Изделия.

5. Основные технические характеристики

Модель	НВ-150	НВ-200
Размер платформы, мм	150x147	200x196
Регулируемая высота, мм	75...274	80...328
Грузоподъёмность статическая/динамическая, кг	50/25	50/25
Габаритные размеры Изделия, ШхГхВ, мм	150x147x75	200x196x80
Масса нетто, кг	1,3	2,2
Масса брутто, кг	1,4	2,3

Материал платформы и рычагов: алюминий

Покрытие платформы: анокс

Материал ходового винта и осей: нержавеющая сталь

6. Условия эксплуатации

Изделие не должно быть подвержено воздействию вибрации и агрессивных паров.

Температура окружающего воздуха	от +5 °С до +40 °С
Относительная влажность воздуха при 25 °С	до 80 %
Атмосферное давление	70 – 106 кПа

7. Устройство и порядок работы

Изделие состоит из нижней платформы - основания с резиновыми опорными ножками, кулисно- рычажного механизма и верхней подвижной платформы. Для управления микролифтом служит пластмассовая ручка, закреплённая на ходовом винте. Её вращение по часовой стрелке осуществляет подъем платформы, а вращение против часовой стрелки – опускание.

8. Правила хранения и транспортировки

Изделие в течение гарантийного срока должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 70% при температуре +25 °С.

Храните Изделие в сухом и чистом помещении с хорошей вентиляцией на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих

устройств.

В местах хранения Изделия не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию металлических частей.

Не допускайте намокания упаковочной коробки и Изделия.

Изделие в упаковке может транспортироваться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах при температуре от минус 35 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не более 95%.

При транспортировке необходимо соблюдать осторожность, не допуская падения Изделия, ударов и прочих механических воздействий, которые могут привести к повреждению Изделия.

9. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации Изделия составляет 6 месяцев с момента реализации в соответствии с документом, подтверждающим факт его приобретения.

Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного срока при выполнении пользователем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации Изделия.

В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт. В случае отсутствия возможности проведения ремонта

производится замена Изделия. Гарантийный срок эксплуатации Изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков.

10. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

Уполномоченным представителем по гарантийному обслуживанию является компания:

ООО «НВ-Лаб».

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3.

Website: www.nv-lab.ru

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «НВ-Лаб».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru

11. Сведения о приемке

Столик подъемный лабораторный металлический:

НВ-150

НВ-200

