



Тройной лабораторный кран Stegler KV-3-550



Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за выбор продукции нашей торговой марки. Наша продукция изготовлена из высококачественных материалов, проходит тщательный контроль на всех этапах производства, полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ.

1. Комплектность

Кран-штуцер лабораторный	1 шт.
Аэратор	3 шт.
Уплотнительное кольцо	2 шт.
Стопорная шайба	1 шт.
Гайка	1 шт.

2. Описание

Лабораторный кран (Изделие) для подачи холодной или горячей воды. Выполнен из латуни, покрытой порошковой краской. Габаритные размеры - 230x610x345 мм.

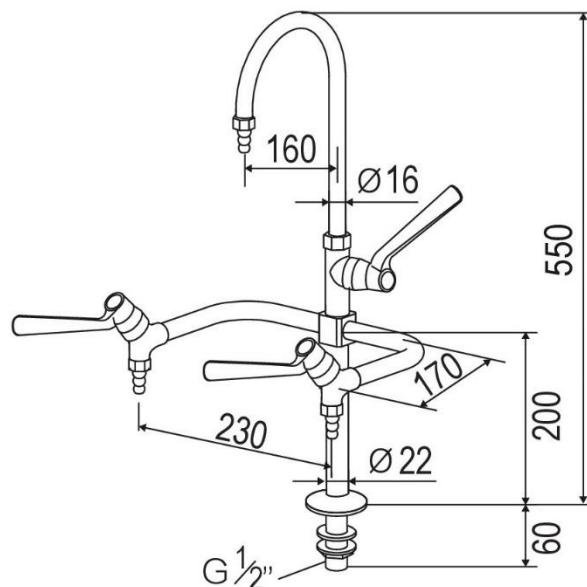

3. Установка

Снимите с изливов аэраторы, чтобы они не забились ржавчиной и другими возможными загрязнениями из труб. Аэраторы этой серии соответствует разьему G 1/2".

Установите Изделие в следующей последовательности:

1. Определите место установки Изделия. Просверлите в рабочей поверхности отверстие диаметром 20 мм.
2. Установите Изделие на рабочую поверхность. Чтобы вода не протекала по корпусу, поместите уплотнительное кольцо в специальный паз в основании смесителя.
3. Надёжно зафиксируйте Изделие при помощи гайки предварительно установив второе уплотнительное кольцо и стопорную шайбу.

4. Рекомендации по уходу и обслуживанию

Если на аэраторе есть загрязнения, или расход воды излива низок, разветвлён или отклонён, достаточно очистить аэратор моющим средством или водой с мылом, промыть водой и высушить.

Не допускайте падения и механического повреждения Изделия. При уходе пользуйтесь мягкой салфеткой и щадящими моющими средствами, которые не содержат абразивные частицы.

Рекомендуется установка фильтров механической очистки воды не более 100 мкм, как для холодной, так и для горячей воды.

5. Правила хранения и транспортировки

При необходимости хранения Изделия в течение гарантийного срока эксплуатации, Изделие должно находиться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%, а также на расстоянии не менее 1 м от нагревательных устройств.

Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах, в диапазоне температур от -35°C до +50°C и относительной влажности не более 95%.

6. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе, при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации Изделия составляет 12 месяцев с момента реализации при предоставлении товарной накладной, чека или иного документа, подтверждающего факт его приобретения.

В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт. В случае отсутствия возможности проведения ремонта производится замена Изделия. Гарантийный срок эксплуатации Изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков.

Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного срока, при выполнении пользователем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации Изделия.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- Если повреждение произошло по вине пользователя в процессе перевозки, установки или использования Изделия.
- Если повреждение произошло при разборке Изделия неавторизованным персоналом.
- При невозможности подтвердить факт покупки документально.
- При возникновении повреждения из-за несоблюдения требований безопасности, описанных в данном Руководстве по эксплуатации.
- Если повреждение возникло по причине стихийного бедствия или аварии.
- По истечению установленного срока гарантийного ремонта.

7. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

Название организации: ООО «НВ-Лаб».

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3.

Website: www.nv-lab.ru

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «Компания НВ-Лаб».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru

Серийный номер Изделия: _____