

Лабораторный вентиль выносного крана для холодной воды Stegler VV-35




Руководство по эксплуатации

1. Назначение изделия

Лабораторный кран-штуцер предназначен для регулирования потока воды.

Выполнен из латуни, покрытой порошковой краской.

2. Технические характеристики

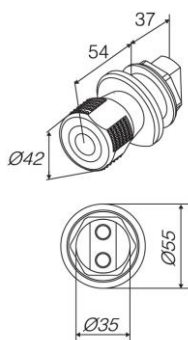

Материал исполнения	Латунь
Габаритные размеры, мм	35x42
Диаметр, мм	42
Масса, кг	0,6

3. Комплектация

Кран-штуцер	1 шт.
Уплотнительное кольцо	1 шт.
Контргайка	1 шт.
Гибкие подводки	2 шт.

4. Установка

1. Определите место установки Изделия. Просверлите в рабочей поверхности отверстие необходимого диаметра.
2. Установите узкое уплотнительное кольцо в паз гайки фиксации Изделия.
3. Присоедините штуцеры гибких подводок к Изделию. Предварительно проверьте, что на концах резьбы установлены уплотнительные кольца.
4. Установив Изделие на рабочую поверхность, зафиксируйте его при помощи контргайки.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента реализации в соответствии с документом, подтверждающим факт его приобретения. Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного срока при выполнении пользователем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- Если повреждение произошло по вине пользователя, в процессе перевозки, установки или эксплуатации изделия.
- Если повреждение произошло при разборке изделия неавторизованным персоналом.
- При невозможности подтверждения факта приобретения изделия документально.
- При возникновении повреждения из-за несоблюдения требований, описанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.
- Если повреждение произошло по причине стихийного бедствия или аварии.
- По истечению установленного срока гарантийных обязательств.

6. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

ООО «НВ-Лаб».

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «НВ-Лаб».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru